

SENDEVAKT SENDER CARE Bruksanvisning




SENG10 CARE benyttes sammen med en senge- eller stolsensor for å varsle aktivitet hos bruker. Sengevakten kan viderevarsle når bruker går ut av seng/stol heller har et lengre fravær fra seng/stol. Sengevakten kan også gi talepåminnelser til brukeren om natten.


BATTERI OG BATTERIELIMINATOR:

SENG10 benytter vanligvis batterieliminatør og spesialbatteri. Spesialbatteriet vil fungere som en backup ved et eventuelt strømbrudd. Selv om en ikke monterer batterieliminatør, vil spesialbatteriet gi flere års levetid ved daglig bruk. Batterieliminatøren kobles til kontakten i bunnen av SENG10. Dersom SENG10 skal tidsstyres (på/av til faste tider i døgnet), benyttes en timer mellom kontakten i veggen og batterieliminatøren. Da må IKKE batteriet settes inn!

OVERSIKT:

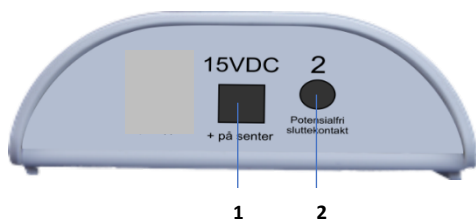

- 1: Tilkobling for medfølgende batterieliminatør 15VDC
- 2: Signalinggang for sengematte eller stolmatte.

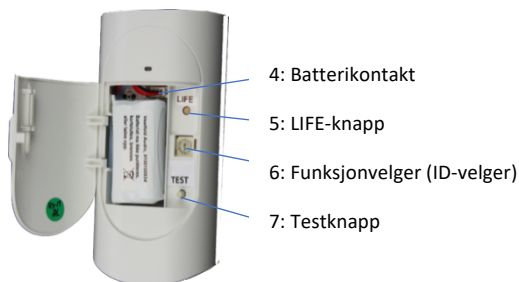

- 4: Batterikontakt
- 5: LIFE-knapp
- 6: Funksjonvelger (ID-velger)
- 7: Testknapp

SAMMENKOBLING:

Alle enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen. LIFE-knappen finner du under lokket på SENG10 CARE.

- 1: Trykk to ganger på LIFE-knappen på en av enhetene. Indikatorlampen blinker grønt.
- 2: Trykk én gang LIFE-knappen på den andre enheten. Indikatorlampen på begge enhetene blinker grønt i 2-3 sekunder.
- 3: Sammenkoblingen bekreftes ved at begge indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
- 4: Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

SAMMENKOBLING AV NY ENHET TIL EKSISTERENDE SYSTEM:

- 1: Trykk to ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
- 2: Trykk én gang på LIFE-knappen på den nye enheten.
- 3: Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
- 4: Enhetene er klare til bruk. Trykk tilkallingsknappen for å kontrollere sammenkoblingen.

NULLSTILLE SAMMENKOBLINGEN:

Trykk fem ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink.

DAGLIG BRUK:

Når man setter/legger seg på senge-/stolmatte, vil et grønt lys på SENG10 tennes. Når lyset starter å blinke, er alarmen aktivert. Dette grønne, blinkende lyset indikerer at matte er i orden og er riktig plassert i seng/stol i forhold til brukeren. Når brukeren reiser seg fra seng/stol, vil SENG10 varsle etter innstilt tid.

VELG FUNKSJON (ID-velger):

SENG10 CARE har innebygget flere ferdigprogrammerte varslinger. Velg varslings-ID ved å vri på funksjonsvelgeren, som du finner under lokket på framsiden. Varslingene kan ytterligere spesialtilpasses i varslingsmottakeren IRIS CARE eller via vår Skytjeneste.

ID	Varsel	ID	Varsel
0	Varsling 1	8	Alarm 8
1	Varsling 1	9	Alarm 9
2	Varsling 2	A	Alarm 10
3	Varsling 3	B	Alarm 11
4	Varsling 4	C	Alarm 12
5	Varsling 5	D	Alarm 13
6	Varsling 6	E	Alarm 14
7	Varsling 7	F	Alarm 15

MONTERING:

SENG10 monteres normalt på sengegavlen med borrelås-tapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre veggen. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder. Alternativt kan enheten festes med skrue gjennom festehullet under batteriet.

TILKOBLING AV MATTE:

Sengematte eller stolmatte kobles til kontakten (2) i bunnen av SENG10.

NB! Pass på at matten ligger slik at den oppfatter brukeren i sengen/stolen og at den reagerer raskt når den forlates.

I BRUK:

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på fremsiden.

Slukket:	Stand-by
Grønt:	Varsel sendes
Blinkende rødt/grønt:	Bytt batteri

VIKTIG INFORMASJON:

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte. Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

RESIRKULERING:

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

SIKKERHET:

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrues fra hverandre. Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket. Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

TEKNISKE DATA:

Dim. (bxhxd): 69x133x27mm
 Vekt m/batteri: 140 g
 Batteri: Litium 3V
 Sendereffekt: 10 mW e.r.p.
 Temperatur: -10 °C - +40 °C
 Radiofrekvens: 868.1 - 869.85 MHz

SAMSVARERKLÆRING:

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

FEILSØKING:
Problem: Det varsles ikke i mottakere.

- 1: Lysindikator lyser ikke grønt.
Trykk på Testknappen og sjekk om varselet kommer frem.
- 2: Enhetene er ikke sammenkoblet.
Utfør sammenkobling.
- 3: Avstanden mellom SENG10 og mottaker er for stor.
Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en Repeater CARE.
- 4: Matten oppfatter ikke at bruker har reist seg.
Sjekk om matten er skadet.
- 5: Matten ligger ikke riktig/oppfatter ikke at bruker er tilstede.

Legg matten slik at den aktiveres.

6: Matten er ikke korrekt tilkoblet.

Kontroller tilkobling.

Problem: Det varsles med feil signal i mottakere.

- 1: Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.
Skru funksjonsvelgeren til riktig posisjon.

Problem: Det blinker rødt/grønt i SENG10.

- 1: Batteriet er snart tomt.

Bytt batteri.

Problem: Etter Test-trykk lyser knappen rødt.

- 1: Enheten er ikke sammenkoblet.

Koble enheten til en mottaker.

Problem: Etter Test-trykk lyser VEL10 lenge grønt, deretter oransje.

- 1: Ingen mottaker er sammenkoblet med enheten.
Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen.

Problem: Sammenkobling fungerer ikke.

- 1: Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.
Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til for å nullstille den.

Problem: SENG10 virker selv om timer i kontakten slår av.

- 1: Det står batteri i SENG10

Ta ut batteriet.

